

INO-ZLS Serisi Vakumlu Santrifüjler / Konsantratörler

INOZLS Serisi Santrifüj Vakum Konsantratörleri, biyolojik bilim ve tıp biliminin bilimsel araştırma gereksinimlerini karşılayan çok önemli bir deneysel ekipmandır.

INOZLS, santrifüj sedimenti işlevini ve vakum sistemini birleştirir ve sürekli olarak sabit bir sıcaklıkta tutar. Malzemelerin konsantrasyonu sırasında buharlaşma ve süblimasyon ihtiyacını karşılar ve bu nedenle biyolojik numuneleri hızlı bir şekilde konsantre eder veya kurutur.


INOZLS Serisi Konsantratörler, modern biyolojinin deneysel araştırma merkezi için özel olarak tasarlanmıştır

INOZLS Serisi proteomik, genomik, hücre biyolojisi, mikrobiyoloji ve ilaç geliştirmede kullanılır.

Bir vakumlu santrifüj yoğunlaştırıcı, vakumlu santrifüj kuvvetini vakumla ve bazen sıvıyı konsantre etmek ve daha fazla kullanım veya iş için DNA, RNA, nükleotitleri ve diğer proteinleri konsantre etmek için ısı veya gaz üfleme kullanarak çok yönlü çalışmalar sağlar



CE

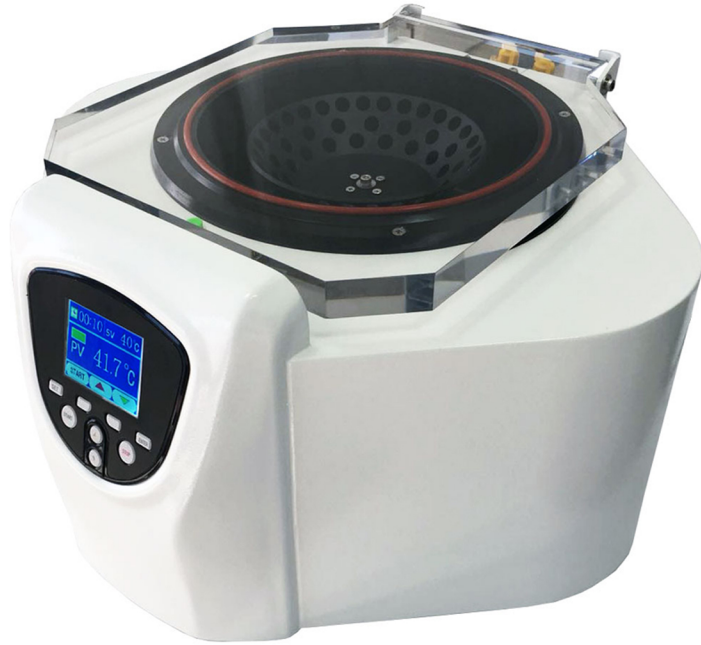

Özellikler:

1. TFT gerçek renkli LCD geniş ekran dokunmatik monitör, mikro bilgisayar kontrolü, kolay ve doğrudan işlem arayüzü ile rahat bir çalışma sağlar.
2. Alüminyum alaşımlı haznenin içi korozyona dayanıklı kaplama ile kaplanmıştır.
3. Bakım gerektirmeyen ve temassız dönüş sistemi.
4. Zarif tasarım, kolay kullanım, uygun çalışma.
5. Motorla uyumlu olan farklı tip rotor seçenekleri.
6. İşlem durumunu gözlemlemek için uygun şeffaf kaplama.
7. Ayarlanabilir yoğunlaşma zamanı: 0 - 99h59dk.
8. "Cold-Trap" ile birlikte kullanılabilir.

Teknik Özellikler;

Model	INO-ZLS-1	INO-ZLS-2	INO-ZLS-3
Hız (r/dk)	1350	1500	2000
Rotor Kapasitesi	1.5mlx62	10mlx12 / 50mlx6	250mlx6 (50mlx6x2 / 20mlx6x5 Adaptör)
Sıcaklık Aralığı (RT)	55°C	60°C	60°C
Vakum Pompası	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel