


IHA-T50 5 Part Otomatik Hematoloji Analiz Cihazı



Özellikler;

1. Verim: 60T / H.
2. 14 inç Dokunmatik Ekran
3. Üç açılı lazer saçılımı + akış sitometrisi yöntemi + RBC ve PLT sayımı için empedans yöntemi.
4. 3D holografik scattergram doğru görüntüler WBC'nin 5 bölüm farklılaşması.
5. Büyük depolama kapasitesi: 100.000 sonuç (histogram, scattergram, hasta bilgisi dahil)

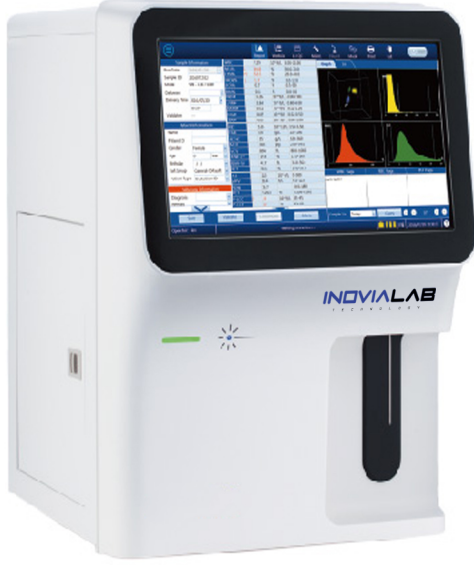

Teknik Özellikler;

Model	IHA-T50
Verim	60 Test/saat
Tahlil Öğeleri	5 bölüm, 29 parametre, 3 histogram
Prensip	Üç açılı lazer saçılımı, Akış sitometrisi yöntemi, 3D saçılım analizi, RBC ve PLT sayımı için empedans yöntemi, HGB testi için siyanür içermeyen reaktif
Test Modu	CBC modu, CBC + DIFF modu Venöz tam kan, Kılcal tam kan ve Önceden seyreltilmiş
Parametreler	WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PCT,PDW, P-LCR, P-LCC, NEU%, LYM%, MON%, EOS%, BAS%, NEU%, LYM#, MON#, EOS#, BAS#
Örnek Hacmi	4 Araştırma parametresi: ALY%, ALY#, IG%, IG#
Depolama	CBC+DIFF modu: ≤20µl CBC modu: ≤10µl
Arayüz	100,000 results including histogram, scattergram and patient information
Güç Kaynağı	4 USD Bağlantı Noktası, 1 LAN Bağlantı Noktası, İki Yönlü LIS, Destek HL7 protokolü, Dahili RFID okuyucu
Ambalaj Boyutu (GxDxY)	AC220V ±10% 50/60Hz, 110V ±10% 60Hz, 400VA
Reaktif Ambalaj Boyutu (GxDxY)	670x590x790mm
Brüt Ağırlık	320x320x290mm
Reaktif Brüt Ağırlık	53 Kg
	22 Kg

Performans

Madde	Doğrusallık aralığı	Nakletmek	CV
WBC	0-300x10 ⁹ /L	≤0.5%	≤2.0%
RBC	0-8.00x10 ¹² /L	≤0.5%	≤1.5%
HGB	0-250g/L	≤0.5%	≤1.5%
PLT	0-3000x10 ⁹ /L	≤1.0%	≤4.0%