


ProH Serisi Homojenizatörler

Genel Özellikler;

1. Fibröz dokuların ve dirençli hücrelerin hızlı bir şekilde bozulmasını sağlayan "3D Dönen Yüksek Hızlı Hareket".
2. ProH-6000 ve ProH-6000R için 50 programlanabilir hafıza ayarı ve kullanıcı için isteğe bağlı durum ayarları.
3. 4,0m/s'den 7,0m/s'ye kadar değişen, 0,05 m/s'lik artışlarla geniş bir dönme hızı ayarı.
4. Bakım gerektirmeyen ve partikül oluşumunu engelleyen Fırçasız Motor.
5. Tüp tutucu aparatın sökülmesi ve tekrar monte edilmesi rahat ve basittir.
6. Şeffaf kapak, parçalama işlemi sırasında sürecin izlenmesine imkan tanır.
7. Aynı anda homojenleştirme;
ProH-1000 6 x 2ml tüpler veya 2 x 5ml tüpler,
ProH-6000 24 x 2ml tüpler veya 12 x 5ml tüpler,
ProH-6000R 24 x 2ml tüpler veya 12 x 5ml tüpler ile sağlanmaktadır.
8. Tek kullanımlık tüpler çapraz kontaminasyon tehdidi sağlamaz.
9. ProH-1000, ProH-6000 ve ProH-6000R, tüpleri, genellikle 35 saniye veya daha kısa bir sürede, verimli, tutarlı, yüksek verimli ve yüksek kaliteli homojenizasyon sağlamak üzere tüpleri sıkıca ve pürüzsüz bir şekilde sallar.

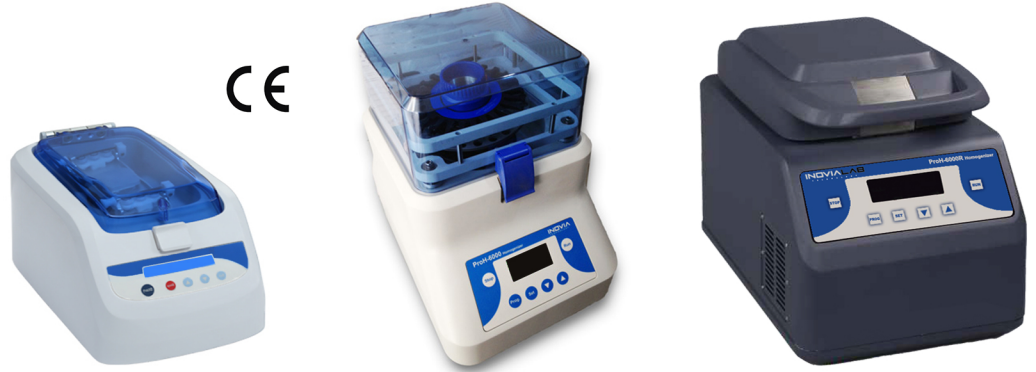

Teknik Özellikler;

Model	ProH-1000	ProH-6000	ProH-6000R
Sıcaklık Aralığı	Yok	Yok	-10° - 40°C
OS'dan 0°C'ye	Yok	Yok	<30dk
Sıcaklık Kararlılığı	Yok	Yok	±2°C
Soğutma Yöntemi	Yok	Yok	Kompresör Soğutma
Hız Aralığı (m/s)	4.00m/s - 7.00m/s 0.05m/s'lik artışla	4.00m/s - 7.00m/s 0.05m/s'lik artışla	4.00m/s - 7.00m/s 0.05m/s'lik artışla
Hız Aralığı (rpm)	2500 - 4350 10rpm'lik artışla	2430 - 4260 10rpm'lik artışla	2430 - 4260 10rpm'lik artışla
Ekran	LCD	OLED	OLED
Çevrim Süresi	1s - 90s, 1s'lik artışla	1s - 90s, 1s'lik artışla	1s - 90s, 1s'lik artışla
Durma Süresi	1s - 90s, 1s'lik artışla	1s - 90s, 1s'lik artışla	1s - 90s, 1s'lik artışla
Çevrim	10	10	10
Program Hafızası	1	50	50
Programlanabilir Örnekler	6 x 1.5/2ml veya 2 x 5ml	24 x 1.5/2ml veya 12 x 5ml	24 x 1.5/2ml veya 12 x 5ml
Hızlanma Süresi	<2s	<4s	<4s
Gürültü	<65db	<70db	<70db
Aşınma Parçası	Yok	Yok	Yok
Adaptör	2ml / 5ml için Tutucu (Standart)	2ml x 24 için Rotor (Standart) 5ml x 12 için Rotor (Opsiyonel)	2ml x 24 için Rotor (Standart) 5ml x 12 için Rotor (Opsiyonel)
Güç Kaynağı	AC100/240V 50/60Hz	AC100/240V 50/60Hz	AC100/240V 50/60Hz
Güç Gereksinimi (W)	150	150	150
Boyutlar (DxGxY)(mm)	354x218x206	280x360x385	300x500x360
Ağırlık (Kg)	8.9	25	40