

BCS Serisi Bakti Sineratör Sterilizasyon Üniteleri



BCS-3000A



BCS-3000C



BCS-3000D



BCS-3000E

Özellikler;

Bakti-Sinerator Sterilizasyon üniteleri, seramik bir çekirdek elemanı tarafından üretilen kızılötesi ısıyı kullanan mikro organizmaları sterilize eder.

Seramik eleman asbest içermez ve çalışma yüzeyi boyunca sıçramasız maksimum sterilite sağlar.

Bir sterilizasyon işlemi süresi, 1500°F (815.6°C) optimum sterilizasyon sıcaklığında ortamala 5 - 7 saniye içerisinde gerçekleşmektedir.


Küçük kaplama alanı, Bakti-Sinerator sterilizasyon ünitelerini hem anaerobik hem de aerobik çalışma odaları için ideal bir araç yapmaktadır.

Kullanıcı dostu aksesuarlar cihaz ile birlikte opsiyonel olarak tercih edilebilir.

Teknik Özellikler;

Model	BCS-3000A	BCS-3000C	BCS-3000D	BCS-3000E
Merkez Yüksek Sıcaklık	825°C ±5°C			
Ayarlanabilir Açı Aralığı	Yok	Yok	55°	55°
Maks. Sterilizatör Eşya Çapı	Φ14mm	Φ35mm	Φ14mm	Φ35mm
Sterilizatör Uzunluğu (mm)	150	100	150	100
Güç Gereksinimi (W)	170	320	170	320
Boyutlar (DxGxY)(mm)	185x98x185	162x95x225	159x100x260	153x100x280
Ağırlık (Kg)	1.3	1.3	1.5	1.6

No	Kod	Açıklama
1	AS-07020-00	BCS-3000A, AC220V/AC120V, 50/60Hz, 1A
2	AS-07050-00	BCS-3000C, AC220V/AC120V, 50/60Hz, 1A
3	AS-07090-00	BCS-3000D, AC220V/AC120V, 50/60Hz, 1A
4	AS-07100-00	BCS-3000E, AC220V/AC120V, 50/60Hz, 1A
5	AS-07021-01	220V BCS-3000A için Isıtıcı
6	AS-07021-02	120V BCS-3000A için Isıtıcı
7	AS-07051-01	220V BCS-3000C için Isıtıcı
8	AS-07051-02	120V BCS-3000C için Isıtıcı
9	AS-07021-03	BCS-3000A için Tutucu
10	AS-07051-03	BCS-3000C için Tutucu

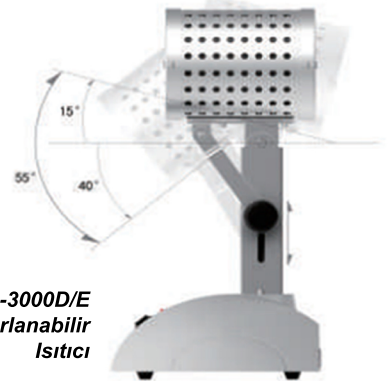

BCS-3000D/E
Ayarlanabilir
Isıtıcı