

INOSP-P Serisi ASTM Tip I Ultra Saf Su Sistemleri

Özellikler:

INOSP-P sistemi sizin için özellikle tasarlanmıştır. INOSP-P sistemi mevcut bir saf su kaynağını yem olarak kullanarak, ultra saf bir su çözümü sağlamak amacıyla günümüz laboratuvar ortamlarına uyarlanmış yüksek kaliteli ultra saf su sunar.

Sadece daha büyük bir ekran değil. Daha iyi bir ekran.

Daha büyük bir ekran yapmak için bir şey var. Parlak renklerle ve daha geniş görüş açılarında daha yüksek kontrastla daha büyük dokunmatik ekran yapmak tamamen başka bir şey.


Konfigürasyonlar;

INOSP-P Sistemler

30L Depolama Tankı
Çift Dalga Boyu UV Lambası
Ultra Arıtma Kartuşu
Ultra Filtrasyon Kartuşu
Kullanım Noktası Filtresi
Tank için Hava Filtresi Ağı
Tank için UV Lamba Sterilizatörü
Su Dağıtıcı Kumandası
TOC İzleme Modülü

INOSP-P	INOSP-PT
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
/	☐

Smart Plus P

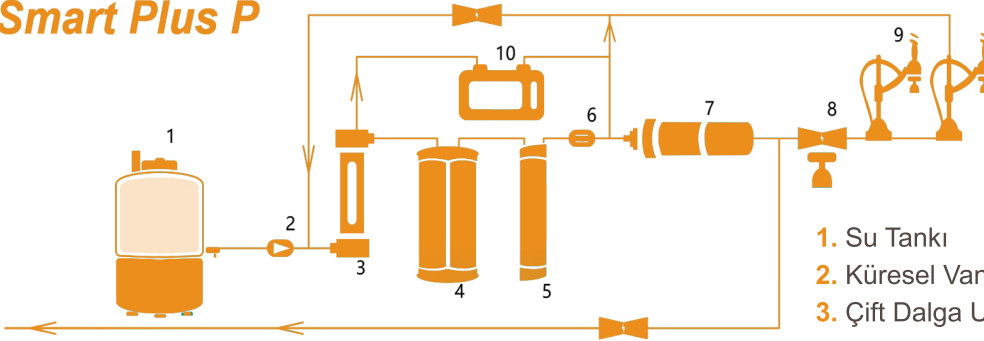

- 1. Su Tankı
- 2. Küresel Vana
- 3. Çift Dalga UV Kartış
- 4. Arıtma Modülü
- 5. Ultra Arıtma Modülü
- 6. İletkenlik Sensörü
- 7. Ultra Filtrasyon Kartuşu
- 8. Kullanım Noktası Filtresi
- 9. Su Dağıtıcı Kumandası
- 10. TOC İzleme Hücresi

Teknik Özellikler;

Model	INOSP-P	INOSP-PT
Besleme Suyu İhtiyacı		
Kaynak	RO, Distile, DI Su (İletkenlik<20µs/cm)	
Sıcaklık	5 - 40°C	
Ultra Arıtma Suyu (I. Sınıf)		
25°C'de Direnç	18.2MΩ.cm	
25°C'de İletkenlik	0.055us/cm	
Akış Hızı	1.5 - 2.0L/dk	
TOC Seviyesi*	1 - 5ppb	
Endotoksin (Pirojen)**	<0.001EU/ml	
Parçacıklar (≥0.02µm)	<1pc/ml	
Bakteri*	<0.1cfu/ml	
Rnase/Dnase**	Free	
Güç Kaynağı	110V/220V±10% 50Hz/60Hz	
Ana Ünitelerin Ağırlığı (NxB)	32kg - 45kg	
Su Deposunun Ağırlığı (30L)	4.5kg - 13kg	
Ana Ünite Boyutu (GxDxY)	315x525x570mm	
Ana Ünite Ambalaj Boyutu	525x610x770mm	
Su Tankı Boyutu (30L)(GxDxY)	380x380x595mm	
Su Tankı Ambalaj Boyutu	520x440x615mm	



* Çift dalga UV modülünün benimsenmesi gerekiyor. Ayrıca besleme suyuna bağlı, önerilen besleme TOC >30ppb.

** Ultra filtrasyon modülünün benimsenmesi gerekiyor. Beslenme suyunun yukarıdaki gibi sağlanması gerekir.