

INOS-ROE Pureforce Serisi CAP / CLSI Tip I Yüksek Saf Su Sistemleri

Özellikler;

INOROE Su Arıtma Sistemleri, döngü dağıtımı yoluyla aynı anda birden fazla otomatik biyokimyasal analizör için yüksek kaliteli besleme suyu sunar.

Laboratuvar suyunun merkezi dağıtımında uzun yıllara dayanan deneyim ile dönemin öncüleri arasında yer almakla birlikte hizmette kaliteyi, tasarımı ve yenilikçilik standartlarını belirler.

INOROE Su Arıtma Sistemleri, araştırma laboratuvarlarında yüksek talep gören su çözümleri için özel olarak tasarlanmıştır. INOROE Elektrodeiyonizasyon modülü ile birlikte sürekli olarak Tip II Saf Su üretimi sağlamaktadır.



Hızlı Sterilizasyon

Su kalitesini sağlamak için ters ozmoz, sirkülasyon pompa hattı ve su tankını sterilize etmek için sadece basit bir tuşa basın


Dokunmatik Ekran Kontrolü

Çoklu parametreler için 8,0 inç renkli ekran
İnsan-makine etkileşimli akıllı kontrol
Zamanında alarm fonksiyonu ile filtre ömrü göstergesi

Teknik Özellikler;


Model	ROE-70	ROE-100	ROE-150 ROE-1502	ROE-300	ROE-500
Verimlilik Oranı (L/s)	70	100	150	300	500
Besleme Suyu İhtiyacı					
Kaynak	Musluk Suyu				
İletkenlik	<2000us/cm	<2000us/cm	<400us/cm	<400us/cm	<400us/cm
Sertlik	CaCO3 olarak <450ppm		Yok	Yok	Yok
Basınç	0.1-0.5MPa	0.1-0.5MPa	0.1 - 0.4MPa	0.1 - 0.4MPa	0.1 - 0.4MPa
Sıcaklık	5 - 40°C				
Yüksek Kalite Arıtma Suyu (II. Sınıf)					
25°C'de Direnç	≥10MΩ.cm				
TOC	<30ppb				
Çözünmüş Organik	<0.1ppm				
Parçacıklar (≥0.02um)	<1pc/ml				
Bakteri	<1cfu/ml				
İyonik Reddetme	N/A	N/A	≥98%	≥98% ≥99%	≥98%
Bakteri Reddetme	N/A	N/A	≥99%	≥99%	≥99%
Akış Hızı	3.0 - 4.0L/dk		N/A	N/A	N/A
Güç Kaynağı	110/220V ±10% 50/60Hz				
Net Ağırlık (Kg)	120	120	N/A	N/A	N/A
Ambalaj Ağırlığı	150	150	N/A	N/A	N/A
Boyutlar (GxDxY)	650x715x1650mm			1040x800x1850mm	
Ambalaj Boyutları (GxDxY)	735x780x1790mm			N/A	N/A

Pureforce ROE (ROE-70/100)

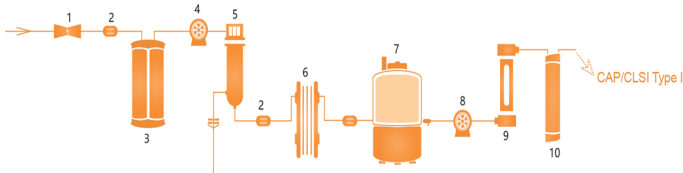

- | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------|
| 1. Selenoid Vana | 5. RO Modülü | 8. Küresel Vana |
| 2. İletkenlik Sensörü | 6. EDI Modülü | 9. Tek Dalga UV Kartuş |
| 3. Ön Arıtma Modülü | 7. Su Tankı | 10. Mikro Arıtma Modülü |
| 4. Artırma Pompası | | |

Pureforce ROE (ROE-150/150'2/300/500)

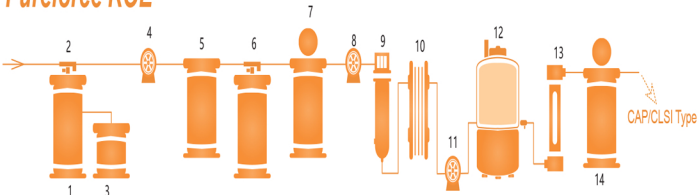

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Sistemi Yumuşatın (İsteğe Bağlı) | 8. Yüksek Basınç Pompası |
| 2. Elektronik Çok Yönlü Valf | 9. RO Modülü |
| 3. Tuz Tankı (İsteğe Bağlı) | 10. EDI Modülü |
| 4. Ham Su Besleme Pompası | 11. Artırma Pompası |
| 5. Ön Filtre | 12. Dahili Yüksek Saf Su Tankı |
| 6. Aktif Karbon Filtresi | 13. UV Lamba |
| 7. Güvenlik Filtresi | 14. Kullanım Noktası Filtresi |