

INOPurauto 100 Serisi Nükleik Asit Sistemi



a.INOPurauto-100A



b.INOPurauto-100B



c.INOPurauto-100C



Ürün Bilgisi

INOPurauto-100 Serisi manyetik boncuk yöntemi ile nükleik asit ekstraksiyonu ve saflaştırma cihazıdır.

INOPurauto100A / 100B maksimum 5 ml numune hacmi ile aynı anda 10 numuneye kadar ekstrakte edebilir.

INOPurauto 100B, blok ısıtma fonksiyonu sayesinde küçük hacimli aletler ile birlikte, sahada büyük numune ekstraksiyonu için ezici bir seçimdir.

INOPurauto-100C en fazla 16 örneği aynı anda kabul edebilir, maksimum numune hacmi 1 ml'dir. Farklı tipteki manyetik boncuk nükleik asit reaktifleri ile hayvan ve bitki dokularındaki nükleik asitler, kan, vücut sıvıları, adli örnekler ve diğer numuneleri hızlı bir şekilde ekstrakte edebilir.

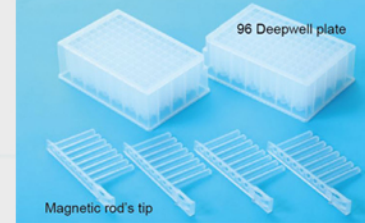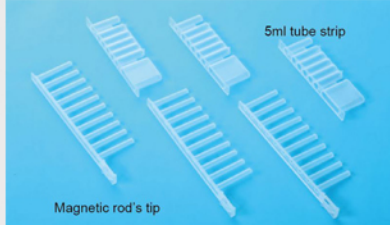

Teknik Özellikler;

Model:	INOPurauto-100A	INOPurauto-100B	INOPurauto-100C
Veri:	1~10	1~10	1~16
İşlem Hacmi:	50~5000ul	50~5000ul	50~1000ul
Sarf Malzemesi:	5ml tube strip + Magnetic rod's tip	5ml tube strip + Magnetic rod's tip	96 Deepwell plate + Magnetic rod's tip
Blok Isıtma:	None	Yes (RT+5°C~105°C)	None
Lizis Sıcaklığı:		Ambient temperature~120°C	
Elusyon Sıcaklığı:		Ambient temperature~120°C	
Saflaştırma Hassasiyeti:		100 copy sample positive rate>95%	
Kararlılık:		CV<5%	
Toplama Verimliliği:		> 95%	
Karıştırıcı:		Mixing methods is editable according to different requirements	
Çalışma Arayüzü:		4.3 inch touch screen, 3 shortcut keys, external mouse	
Yerleşik Protokol:		Present 6 group programs, 100 pcs can be saved	
Program Yönetimi:		PC software, APP software, Program editing, Easier management	
Genişletme Arayüzü:		Standard USB, LAN, Wifi	
Aydınlatma:		Yes	
Kirlilik Kontrolü:		UV light	
Egzos Yolu:		By Fan	
Veri Depolama:		Built-in SD card	
Maksimum Giriş Gücü:		330W±5%	
Boyutlar:		340x350x410mm	
Ağırlık:		18.3kg	